


Informationen zur Probengewinnung RD Laboratorien GmbH, Labor Prof. Geiger

Zur Sicherung der Qualität der Untersuchungen ist eine richtige Gewinnung des Probenmaterials wichtig. Wir bitten Sie die nachfolgenden Hinweise zur Probengewinnung zu beachten.

Allgemeine Information

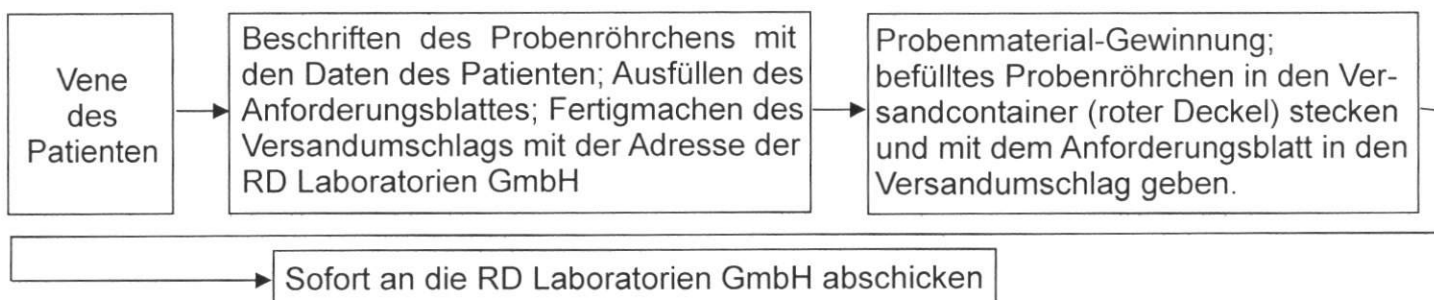

Untersuchungsmaterial-spezifische Information

Tumor-Status Blutabnahme mit einem zur Serum-Gewinnung geeigneten Abnahme-Besteck (z. B. Gerinnungsaktivator S-Monovette, Sarstedt); innerhalb von 2 Stunden aus dem geronnenen Blut das Serum gewinnen; in ein neues, mit den Angaben des Patienten beschriftetes Röhrchen überführen.

Oxidatives Potential

Gesammtes Oxidatives Potential

Blutabnahme mit einem Heparin- oder Serum-Röhrchen

Selen, Coenzym Q10, Vitamin C, Vitamin E & Superoxiddismutase, etc.

Blutabnahme mit einem Heparin-Röhrchen, bez. mit einem EDTA-Röhrchen (Angaben finden Sie auf der Untersuchungsanforderung), gut mischen und direkt, ohne weitere Behandlung, an die RD GmbH schicken.

Andere Untersuchungen

Bitte die Anweisungen auf den jeweiligen Anforderungsblättern beachten.

RD Laboratorien für biologische Forschung GmbH
Mühlstr. 8, 86911 Dießen a. A.
Tel. 08807 - 911 51; Fax 08807 - 911 53
rd.lab@t-online.de